



## TEST DE DÉTECTION DU THC ET DE SES RÉSIDUS DANS LES URINES

Le test EXACTO® CANNABIS est un test immunochromatographique rapide qui permet de détecter la substance active (THC) et ses métabolites dans les urines.

### CANNABIS

Origine

Mélange de feuilles et d'extrémités florales de la plante cannabis

Propriétés

Action psycho-active

Effets

Excitation, extase, sommeil, troubles psychiques, perte de facultés intellectuelles

Durée de détection dans les urines

1 à 3 jours pour une consommation isolée.

8 à 12 jours pour une consommation régulière.

Jusqu'à 30 jours pour une consommation importante.

### PRINCIPE

Les tests de recherche de toxiques dans les urines font appel à des techniques immunologiques simples. La rapidité et la sensibilité des tests immunologiques en ont fait une méthode de dépistage dans l'urine largement utilisée.

La sensibilité de ce test permet de détecter la présence du THC et de ses métabolites, témoins urinaires de la consommation de cannabis.

### IMPORTANT

Le test EXACTO® CANNABIS fournit seulement un résultat analytique préliminaire. Une méthode chimique alternative doit être utilisée pour confirmer le résultat.

### CONTENU DU KIT :

- 1 pochette contenant :
  - 1 Cassette
  - 1 Pipette
- 1 notice d'utilisation
- 1 coupelle de recueil


### PRÉCAUTIONS À PRENDRE :

Veillez lire toutes les informations de cette notice avant d'effectuer le test.

- Ne pas utiliser après la date d'expiration indiquée sur la pochette en aluminium.
- Conserver dans un endroit sec à des températures comprises entre 2 et 30°C. Ne pas congeler.
- Ne pas utiliser le test si la pochette est déchirée ou endommagée.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Usage externe uniquement.
- N'ouvrir la pochette du test que lorsque vous êtes prêt à l'utiliser.
- Les tests usagés doivent être mis au rebut dans le respect des réglementations en vigueur.

**Le résultat doit être lu au bout de 5 minutes et ne peut être interprété après 10 minutes.**

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

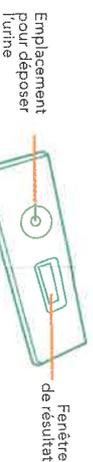

- 1 Uriner dans le récipient fourni. L'urine peut être collectée à n'importe quel moment de la journée. Attention : une urine trouble peut fausser le test.

- 2 Prélever un échantillon d'urine grâce à la pipette.

- 3 Déposer 3 gouttes sur le test. Après ouverture, le test doit être utilisé dans l'heure.

- 4 Lire le résultat au bout de 5 minutes. Ne pas interpréter au-delà de 10 minutes. **5 MN**


### RÉSULTAT

TEST POSITIF :




Une bande colorée apparaît dans la zone de contrôle (C). Aucune bande n'apparaît dans la zone de test (T). Cela signifie que le THC ou l'un de ses métabolites sont présents à une concentration égale ou supérieure aux seuils de détection du test.

TEST NEGATIF :

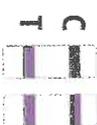

Deux bandes colorées apparaissent, une dans la zone de Contrôle (C) et une dans la zone de Test (T). Le fait que l'une des bandes soit plus claire que l'autre n'a pas d'incidence sur les résultats. Cela signifie que le THC ou que l'un de ses métabolites sont présents à une concentration inférieure aux seuils de détection du test. Les seuils de détection du test sont précisés ci-dessous.

TEST INVALIDE :

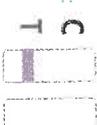

Le résultat n'est pas valable lorsqu'aucune bande colorée n'apparaît dans la zone de contrôle (C), même si une bande apparaît dans la zone de test (T). Répétez la procédure avec un nouveau test. (Vous référer aux instructions d'utilisation. Nous contacter si besoin au 03 88 78 85 24)

### SEUIL DE DÉTECTION DANS L'URINE :

Substances	Concentration ng/ml
11-nor- D9-THC-9 COOH (THC)	50
Cannabinol	20 000
11-nor- D8-THC-9 COOH	30
D8-THC	15 000
D9-THC	15 000

### INDEX DES SYMBOLES

	Attention, consulter le mode d'emploi		Ne pas réutiliser
	Nombre de tests par coffret		Utiliser avant le
	Conservation entre 2°C et 30°C		Numéro de Lot
	N° produit		

IFU 959836\_ML\_V02201 803R03  
REF : 959836

**SERVICE CONSOMMATEURS**  
CONSULIER DEPARTMENT  
+33 (0) 3 88 78 85 24

**BIOSTYNEK SA**  
22 Boulevard Sébastien Brant  
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN  
France  
client@biostynex.com  
www.biostynex.com - www.exacto.fr



## TEST FOR THE DETECTION OF THC AND ITS RESIDUES THE URINE

The EXACTO® CANNABIS test is a rapid immunochromatographic test allowing the detection of detect the active substance (THC) and its metabolites in urine.

### CANNABIS

- Origin**  
Mixture of leaves and flower tops from the cannabis plant
- Properties**  
Psychoactive action
- Effects**  
Exaltation, ecstasy, sleep, mental disorders, loss of intellectual faculties
- Duration of detection in urine**  
1 to 3 days for isolated consumption,  
8 to 12 days for regular consumption,  
Up to 30 days for heavy consumption.

### PRINCIPLE

Urine toxicity testing relies on simple immunological techniques. The speed and sensitivity of these immunoassays have made them a widely used urine screening method. The sensitivity of this test makes it possible to detect THC and its metabolites as urinary evidence of cannabis consumption.

### IMPORTANT

EXACTO® CANNABIS tests only provide a preliminary analytical result. An alternative chemical method should be used to confirm the result.

### KIT CONTENTS


- 1 pouch containing:
  - 1 Cartridge
  - 1 Pipette
- 1 instruction leaflet
- 1 collection cup

### PRECAUTIONS TO BE TAKEN

- Please read all the information in this leaflet before performing the test.
- Do not use after the expiry date indicated in the aluminium pouch.
  - Keep in a dry place at temperatures between 2 and 30°C. Do not freeze.
  - Do not use the test if the pouch has been torn or damaged.
  - Keep out of reach of children.
  - For external use only.
  - Only open the test pouch when you are ready to use it.
  - Used tests must be discarded adhering to the regulations in force.

**The result must be read after 5 minutes and not interpreted after 10 minutes.**


### INSTRUCTIONS FOR USE

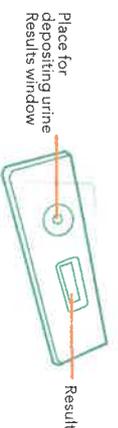

- 1** Urinate in the container provided. The urine may be collected at any time of the day.  
Caution: cloudy urine may falsify the test.



- 2** Take a sample of urine using the pipette.

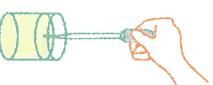

- 3** Transfer 3 drops on the test cartridge. After opening, the test must be used within the hour.



- 4** Read the result after 5 minutes. Do not interpret after 10 minutes.

**5 MN**




### RÉSULTAT

**POSITIVE TEST :** C




A coloured band appears in the control area (C). No band appears in the test area (T). This means that THC or one of its metabolites is present at a concentration equal to or higher than the detection limits for the test.

**NEGATIVE TEST :** C

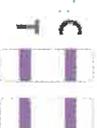

Two coloured bands appear, one in the Control area (C) and one in the Test area (T). The fact that one band is lighter than the other has no impact on the results. This means that THC or one of its metabolites is absent or present at a concentration lower than the test detection limits. The test detection limits are specified below.

**INVALID TEST :** C

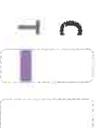

The result is not valid when no coloured band appears in the control area (C), even if a band appears in the test area (T). Repeat the procedure with a new test. (Refer to the instructions for use. Contact us if necessary on +33 (0)3 88 78 85 24)

### DETECTION LIMITS IN URINE :

Substances	Concentration ng/ml
11-nor- D9-THC-9 COOH (THC)	50
Cannabiol	20 000
11-nor- D8-THC-9 COOH	30
D8-THC	15 000
D9-THC	15 000

### INDEX DES SYMBOLES

	Caution, consult the Directions for Use.		Do not re-use.
	Number of tests per box		Use before
	Store between 2°C and 30°C		Batch Number
	Product No.		

RFU\_858836\_ML\_V02201803R03  
REF : 858836

**SERVICE CONSOMMATEURS**  
CONSUMER DEPARTMENT  
+33 (0) 3 88 78 85 24

**BIO SYNEX SA**  
22 Boulevard Sébastien Pant  
67400 ILLKIRCH-GRÄFFENSTADEN  
France  
client@biosynex.com  
www.biosynex.com - www.exacto.fr